

SNABBSTARTS- GUIDE

Välkommen till

Lucia

Mobiltelefon för personer som är blinda
eller har nedsatt syn eller hörsel samt
för äldre.





LUCIA MOBILTELEFON

Mer support

Besök www.luciaphone.com/support för mer information, däribland:

- En nedladdningsbar PDF-version av snabbstartsguiden till LUCIA
- En nedladdningsbar PDF-version av användarhandboken till LUCIA
- Självstudievideor
- Vanliga frågor

Kundsupport

Om du har frågor kan du även kontakta kundsupport:


- Webbchatt: www.luciaphone.com/support
- E-post: service@luciaphone.com
- Telefon: +41 41 51 00 800

Medföljer LUCIA-telefonen:

**LUCIA
mobiltelefon**



Batteri

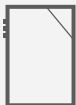

**USB-kabel
typ C**



**Vägg-
laddare**



**Snabbstarts-
guide**




INNAN DU BÖRJAR

Sätt i batteriet och SIM-kortet. Följ anvisningarna på sida 8. Du måste ladda enheten helt innan du använder den för första gången. Anslut LUCIA-telefonen till ett vägguttag med hjälp av vägggladdaren och den USB-kabel av typ C som medföljde telefonen. Du kan använda telefonen medan den laddas. Slå PÅ telefonen. Du slår PÅ telefonen genom att dra skjutreglaget uppåt och hålla kvar det i det läget i minst 3 sekunder. Du kommer att känna en vibration, som talar om för dig att telefonen startar aktiveringsprocessen. Efter vibrationen kan du släppa skjutreglaget. Några sekunder efter vibrationen börjar LUCIA tala.

LADDA LUCIA

Anslut kabeln till telefonen för att ladda batteriet. Laddaren levereras i två delar: en vägggladdare och en USB-kabel av typ C. Sätt i den större av de två ändarna i USB-porten på vägggladdaren. Du är nu redo att ansluta och ladda telefonen.

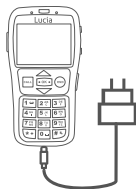

ALLMÄN BESKRIVNING

Låt LUCIA mobiltelefon läsa för dig med sitt inbyggda talstöd. Informationen på skärmen läses upp. Rulla genom kontaktlistan och hör namnen läsas upp eller öppna ett textmeddelande, så läser LUCIA upp det för dig. Det är precis lika enkelt att skriva textmeddelanden. Medan du skriver läses varje bokstav och färdiga ord upp högt. LUCIA mobiltelefon har en enkel meny och beröringskänsliga, färgkodade knappar. Du kommer även att gilla sifferknappsatsen med de stora och ordentligt åtskilda,

beröringskänsliga knapparna, som ser till att du träffar rätt knapp varje gång.


- Läser upp datum, tid, mobilnätsoverator, signalstyrka och återstående batteriladdning
- Väljer bland tillgängliga språk och röster
- Läser upp namnen som finns sparade i Kontakter för inkommande samtal
- Justerar talhastigheten mellan 80 % och 200 % i steg om 10 %
- Hjälper dig att snabbt hitta det du söker med det enkla menysystemet
- SOS-knapp
- Ljudförstärkning
- Kompatibel med hörapparater
- Olåst för kompatibla GSM-nät



ORIENTERING – FRAMSIDA

I det här avsnittet antar vi att telefonen ligger platt på bordet med knapparna närmast dig.


Inbyggd hörlur

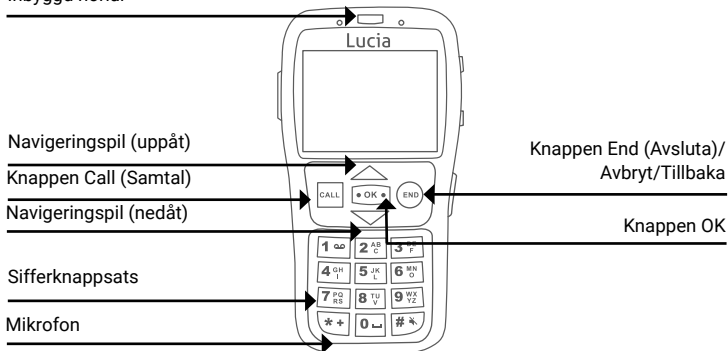

På telefonens framsida finns fem knappar nedanför skärmen. Till vänster finns den fyrkantiga knappen CALL (grön) och till höger finns den runda knappen END/Avbryt (röd). Mellan dessa knappar hittar du navigeringsknapparna uppåt/nedåt. Mellan navigeringspilarna finns den mindre, rektangulära knappen OK (blå).

Omedelbart ovanför skärmen, i mitten, finns den inbyggda hörluren. Sifferknappsatsen är placerad på telefonens nedre del. Den är ordnad i standardmönstret med fyra rader om tre knappar, där den första raden, från vänster till höger, innehåller ett, två och tre. Den andra raden har fyra, fem och sex. Den tredje raden innehåller sju, åtta och nio. Den sista raden har stjärna, noll och fyrkant (telefonen kallar fyrkantsknappen för "nummertecken").

ORIENTERING – KANTER

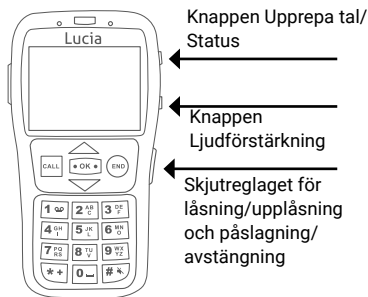


Högerkanten


Det finns tre knappar på den här kanten. De är följande, uppifrån och ned: knappen Upprepa tal, knappen Ljudförstärkning och skjutreglaget för låsning/upplåsning och påslagning/ avstängning. Knappen Upprepa tal fungerar även som telefonens statusknapp och som PÅ/AV-knapp för Talstöd.

Vänsterkanten

På vänsterkanten, nära telefonens överkant, finns knappen för volymjustering. Tryck uppåt på knappen om du vill höja volymen och nedåt om du vill sänka den. Den här justeringsknappen ställer in talvolymen när inget samtal pågår och hörlursvolymen när samtal pågår. Obs! Om du sänker talvolymen så den blir lägre än minimivolymen stängs talfunktionerna i princip av och LUCIA kommer inte längre att tala.

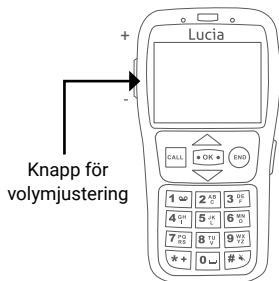

ORIENTERING – ÖVERKANT, UNDERKANT OCH BAKSIDA

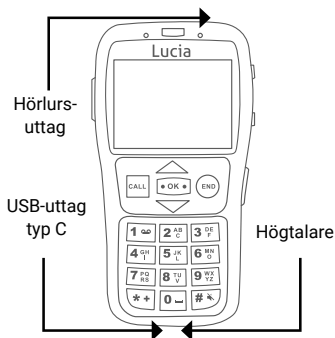

Överkanten

På överkanten, nära telefonens högra ände, finns ett litet runt hål, som är hörlursuttaget. Det är ett standarduttag för en 3,5 mm-kontakt.

Underkanten


På underkanten, till vänster finns en USB-port av typ C som används för laddning. Till höger finns små öppningar för högtalaren.

Baksidan

Baksidan är ett massivt lock i ett stycke med infälld SOS-knapp mitt upptill. Baksidan fungerar även som batterilock och hålls på plats av fästen på insidan. Till höger på underkanten finns en liten försänkning som används för att öppna locket.



DISPLAYSKÄRM

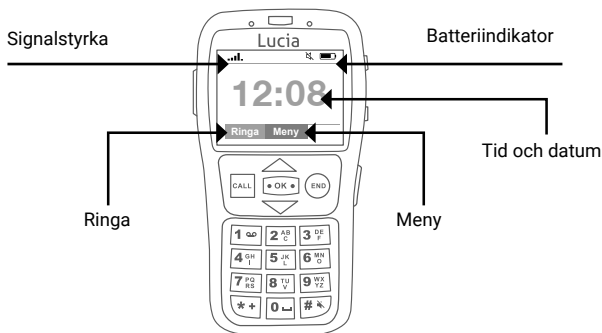

- Hemschärmen har flera ikoner ordnade runt skärmen. Upptill till vänster finns indikatorn för signalstyrka. I mitten finns indikatorn för Talstöd/text till tal. Om den är överkorsad är Talstöd avstängt och då kommer LUCIA inte att tala. Till höger finns batteriindikatorn. Ikonen föreställer ett batteri. När batteriet är fullt visas även ikonerna som fylld. När den laddning som finns kvar i batteriet minskar visas batteriikonen som endast delvis fylld.
- Med standardinställningen visas tiden mitt på skärmen.
- Om vi antar att knappsatsen är olåst (se Slå på och stänga av telefonen) visas orden "Meny" och "Ringa" i blått respektive grönt längst ned på skärmen. Om du vill öppna "Meny" trycker du på den blå OK-knappen i mitten. Om du vill använda "Ringa" trycker du på den gröna CALL-knappen för att ringa ett samtal efter att ha slagit ett nummer eller valt ett telefonnummer från Kontakter.
- Om du vill höra telefonens status, med information om datum och tid, batterinivå och operatör, trycker du bara på knappen Upprepa tal på telefonens högerkant (när hemschärmen visas).

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Nedan följer anvisningar om hur du tar ut batteriet och sätter i eller tar ut ett SIM-kort. Observera att LUCIA är en olåst GSM-mobiltelefon som fungerar på alla GSM-nät.


Ta bort batterilocket

Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet. Vänd på den så att skärmen är vänd nedåt, med knapparna närmast dig. Batterilocket på LUCIA-telefonen är ett lock i ett stycke tvärs över telefonens baksida. Det finns en försänkning i det nedre vänstra hörnet. Börja lyfta locket från det här hörnet för att lossa det andra fästet på ett säkert sätt.



Ta ut batteriet

Du tar ut batteriet genom att helt enkelt börja lyfta det från nederkanten.

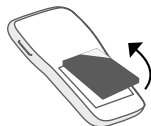

Sätta i/ta ut SIM-kortet

Om du behöver ta ut eller sätta i ett SIM-kort ska du följa dessa anvisningar: SIM-kortsbrickan finns i batterifackets nedre vänstra hörn, under batteriet. SIM-kortet ligger med metallkontakterna vända nedåt och det avklippta hörnet upptill till vänster. SIM-kortsbrickan är täckt av en metallbrygga. Ta loss SIM-kortet från dess hållare, rikta in SIM-kortet så att metallkontakterna vänds nedåt och det avklippta hörnet placeras upptill till vänster. Skjut in SIM-kortet i SIM-brickan under bryggan, som bilden visar. SIM-kort av standardtyp ska användas i LUCIA-telefonen.




Till höger om SIM-kortet finns en kortplats. Om ett kort är isatt i din telefon lagrar kortet fler röster för telefonen och då får det inte tas bort eftersom telefonen inte skulle fungera korrekt utan det här kortet.

Sätta i/byta batteriet

Batteriet kan bara placeras på ett sätt i facket. Tvinga inte in det eftersom det kan skada telefonen. Batteriet har guldfärgade kontakter på en av sina kanter. Rikta in dessa kontakter mot de tre kontakterna upptill till höger i batterifacket. För först in batteriet mot kontakterna och lägg sedan batteriet platt i facket.

Det finns även en svart triangel i batterifackets övre högra hörn och en vit triangel på batteriet, som anger rätt position för batteriet.

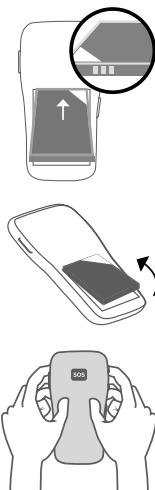


Sätta på batterilocket

Placera batterilocket mot telefonens baksida och tryck runt kanterna tills fästet, som finns längs med telefonens kanter, låses fast.





SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV TELEFONEN

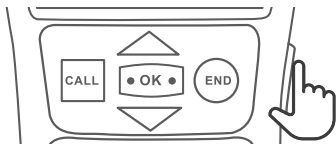

Du slår på telefonen genom att dra skjutreglaget uppåt och hålla kvar det i det läget i minst 3 sekunder. Telefonen kommer att vibrera för att tala om för dig att den startar aktiveringsprocessen. När den vibrerar kan du släppa skjutreglaget. Inom några sekunder börjar LUCIA tala.

Den första gången du slår på telefonen uppmanas du att välja språk och röst samt att ställa in datum och tid. Välj önskat språk med hjälp av pilarna. LUCIA läser upp det för dig. Bekräfta ditt val genom att trycka på OK. Välj aktuellt år med hjälp av pilarna. LUCIA läser upp det för dig. Tryck på OK för att gå till månaden. Använd pilarna för att välja aktuell månad och tryck på OK. Välj sedan dag och tryck på OK. LUCIA läser upp hela det datum du har ställt in innan den ber dig att ange tiden. Följ samma process för att ställa in tiden. Du kan justera tid och datum när som helst.

När telefonen lämnas oanvänd under en viss tid aktiveras knappsatslåset automatiskt. Du kan låsa upp knappsatsen genom att dra skjutreglaget för låsning/upplåsning på telefonens högerkant uppåt. Du kan även låsa telefonen genom att dra skjutreglaget för låsning/upplåsning uppåt.

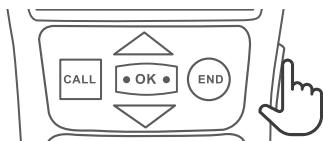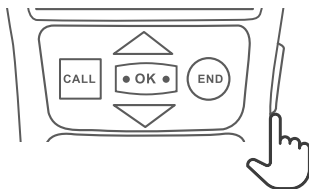

När du vill stänga av telefonen ska du först kontrollera att knappsatslåset inte är aktivt och att du är på hemskärmen. Dra skjutreglaget uppåt och håll kvar det i minst 3 sekunder, tills du hör en signal som informerar dig om att telefonen stängs av.




RINGA ETT SAMTAL OCH SVARA PÅ ETT SAMTAL

När hemskärmen visas kan du ringa ett samtal genom att helt enkelt slå numret med knappsatsen och trycka på den gröna, fyrkantiga CALL-knappen följt av den blå OK-knappen eller CALL-knappen igen. Tryck på den runda, röda END-knappen om du behöver radera felaktiga knapptryck. Du behöver inte vänta på att LUCIA ska läsa upp varje siffra.

Du kan när som helst trycka på knappen Upprepa tal på telefonens högerkant för att få siffrorna du har skrivit upplästa. Numret du ringer kommer även att upprepas när du trycker på CALL-knappen.

Om du vill ringa till en kontakt ska du antingen trycka på nedåtpilen medan hemskärmen visas eller trycka på OK för att öppna huvudmenyn och navigera nedåt till Kontakter. När du öppnar kontaktlistan läses din första kontakt upp för dig. Kontakterna är ordnade i bokstavsordning. Använd navigeringsknapparna för att markera den kontakt som du vill ringa upp. Välj sedan det av kontaktens nummer som du vill slå (arbete, hem eller mobil) och tryck på CALL-knappen. Eller tryck på OK-knappen – då ombeds du bekräfta att du vill ringa upp kontakten. Bekräfta genom att trycka på OK eller gå tillbaka genom att trycka på den runda END-knappen.

När du vill avsluta ett samtal trycker du bara på den runda END-knappen. Om du vill svara på ett samtal trycker du bara på den fyrkantiga CALL-knappen.

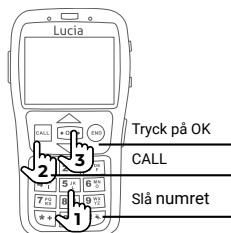


☰ SAMTALSLOGGEN

Den här loggen ger dig åtkomst till uppringda nummer, mottagna samtal och missade samtal. Du navigerar till Samtalsloggen från hemskärmen genom att trycka på OK-knappen. Använd navigeringspilarna för att markera Samtalslogg och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta. Samtalsloggen innehåller tre undermenyer. De är Uppringt, Mottagna samtal och Missade samtal. Du kan visa varje undermeny genom att använda navigeringspilarna för att markera den undermeny du vill

visa och trycka på OK-knappen för att bekräfta. Varje undermeny visar samtalen efter namn om de finns i din kontaktlista eller efter nummer om de inte gör det. Den ger även information om antalet samtal efter att namnet eller numret har meddelats.

Använd navigeringspilarna för att flytta genom listan. Tryck på den fyrkantiga CALL-knappen om du vill ringa numret eller tryck på OK-knappen om du vill höra mer information om samtalet. Telefonnummer samt datum och tid för samtalet läses då upp. Ring upp genom att trycka på den fyrkantiga CALL-knappen eller gå tillbaka till samtalslistan genom att trycka på den runda END-knappen.

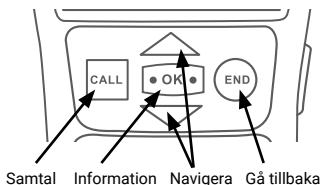

LÄGGA TILL EN KONTAKT

Du lägger till nya kontakter från undermenyn Kontakter genom att välja Lägg till kontakt och trycka på den blå OK-knappen. Du ombeds sedan att ange kontaktens namn. Ange namnet med hjälp av knappsatsen. Sifferknappsatsen använder den vanliga metoden för textinmatning med sifferknappsatser. Tryck helt enkelt på relevant knapp rätt antal gånger utan att göra någon paus, så skrivs motsvarande bokstav in. Du växlar mellan versaler, gemener och siffror genom att trycka på fyrkantsknappen. När du har angett namnet trycker du på den blå OK-knappen för att fortsätta mata in kontaktens uppgifter. Du ombeds sedan att ange kontaktens nummer. Tryck en gång till på OK för att spara kontakten. Välj sedan identifieraren för kontaktens telefonnummer – arbete, hem eller mobil. Tryck på den blå OK-knappen för att bekräfta eller på den röda END/Avbryt-knappen för att gå tillbaka och ändra information. I det senare fallet använder du den röda END/Avbryt-knappen för att radera eventuella fel. LUCIA bekräftar då att kontaktens nummer har sparats korrekt. Nya kontakter får automatiskt standardringsignalen tilldelad.

Du kan även lägga till ett nummer i dina Kontakter från Samtalsloggen eller från Meddelanden. När en lista i samtalsloggen visas markerar du numret som du vill spara i Kontakter och trycker sedan på NOLL-knappen. LUCIA ber dig då att ange ett namn. Slutför det här steget genom att följa samma process som när du lägger till en kontakt manuellt. Om du vill lägga till ett nummer från dina meddelanden går du till Inkorg på undermenyn Meddelanden och trycker på OK. Markera numret som du vill spara i dina Kontakter, tryck på OK och välj sedan "Spara nummer". De återstående stegen för att lägga till numret i dina



INSTÄLLNINGAR

Om du vill öppna "Inställningar" från hemskärmen trycker du på OK-knappen och använder sedan navigeringspilarna för att markera "Inställningar". Tryck på OK. Använd navigeringspilarna för att markera det inställningsalternativ som du vill öppna och tryck på OK.

Datum och tid: Inställningsalternativet Datum och tid finns i "Datum och tid" under kategorin "Allmänt" i "Inställningar". Ange år, månad och dag med hjälp av navigeringspilarna. Rulla uppåt eller nedåt tills du når önskade värden för år, månad och dag. Kontrollera ditt val och tryck sedan på OK-knappen. Du kan använda samma process för att ange tiden.

Språk: Inställningsalternativet "Språk" finns under kategorin "Allmänt" i "Inställningar". Det finns flera olika språk- och röstalternativ att välja bland. Använd navigeringspilarna för att markera önskat språk och tryck sedan på OK-knappen för att välja det. Då ändras menyn och talstödet till det valda språket. Därefter måste du välja vilken röst du vill använda, bland de röstnamn som finns tillgängliga, med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Spara ditt val genom att trycka på OK. Det sker en fördröjning på ca fem sekunder, varefter LUCIA bekräftar ditt val.

Talstöd: Inställningsalternativet "Talstöd" finns under kategorin "Ljud" i "Inställningar". Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att markera Ljud och tryck på OK. Markera Talstöd och markera önskat röstnamn. Bekräfta genom att trycka på OK. Det sker en fördröjning på ca fem sekunder, varefter LUCIA bekräftar ditt val.

Talhastighet: Alternativet "Talhastighet" finns under kategorin "Ljud" i "Inställningar". Använd uppåt- och nedåtpilarna för att öka eller minska talhastigheten och tryck på OK för att bekräfta. Ställer in hastigheten på mellan 80 % och 200 % i steg om 10 %.

Färgschema: Inställningsalternativet "Färgschema" finns under kategorin "Skärm" i Inställningar. Markera "Färgschema" och tryck på OK för att bekräfta. Ändra hur menyer visas på skärmen. De kan visas i olika färgkombinationer. Använd navigeringspilarna för att välja önskad färgkombination och tryck sedan på OK-knappen för att spara.

Ljusstyrka: Inställningsalternativet "Ljusstyrka" finns under kategorin "Skärm" i "Inställningar". Skärmens ljusstyrka kan justeras mellan 0 och 100. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att ändra ljusstyrkan i steg om 5 % och tryck sedan på OK-knappen för att spara.

Ringsignaler: Inställningsalternativet "Ringsignaler" finns under kategorin "Ljud" i "Inställningar". Det finns olika ringsignaler att välja bland. När du lägger till en ny kontakt får den automatiskt standardringsignalen.

SOS: För att slippa oroa dig kan du ställa in nödkontaktnummer som rings upp automatiskt när du håller SOS-knappen på telefonens baksida intryckt i tre sekunder eller längre tid. Du kan ställa in högst fem nummer för SOS-funktionen. Telefonen kommer att försöka ringa upp varje nummer i turordning, med början från SOS 1, tills någon svarar. LUCIA börjar vibrera, SOS-knappen och knappsatsen börjar blinka och LUCIA meddelar med tal och på skärmen att SOS-uppringning pågår. Personen du ringer till kommer att höra ett meddelande som säger att det här är ett nödsamtal och uppmanar honom eller henne att trycka på valfri siffra på sin telefon för att acceptera samtalet. Den här processen hjälper till att bortse från samtal som inte besvaras av en människa, t.ex. samtal som kopplas till telefonsvarare. När nödsamtalet har accepterats aktiveras LUCIAs högtalartelefon, så att LUCIA-användaren kan använda telefonen i handsfree-läge. Om du vill avbryta processen för SOS-uppringning trycker du på END-knappen.

Obs! SOS-samtalsfunktionen fungerar bara om du har en aktiv tjänst för mobil kommunikation. I en nödsituation har du dock alltid möjlighet att ringa till larmcentralen, oavsett om du har ett positivt saldo eller inte, på numret 112 i de flesta europeiska länder (Storbritannien > 999 / USA, Kanada och Mexiko > 911). Du kan även ställa in 112 som ditt sista SOS-nummer för att vara säker på att kunna få hjälp om samtalen till andra nummer från din SOS inte besvaras.

WARNING: SOS-funktionen är inte ett alternativ till att ringa 112. Om du befinner dig i en nödsituation och behöver hjälp av polis, ambulans eller brandkår ska du ringa 112 (Storbritannien > 999 / USA, Kanada och Mexiko > 911). Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om huruvida och hur SOS-funktionen kommer att fungera. Varken Antarus SA eller dess tjänstemän, ombud eller återförsäljare kan hållas ansvariga för några som helst anspråk, skador eller förluster som uppstår till följd av att SOS-funktionen inte fungerat korrekt.

Vibrera: Inställningsalternativet Vibrera finns under kategorin "Ljud" i "Inställningar". Du kan aktivera funktionen Vibrera om du vill uppmärksammas på eventuella inkommande samtal genom att telefonen vibrerar. Det finns tre olika alternativ: Alltid, Aldrig och Ljudlöst läge.



LJUDFÖRSTÄRKNING

WARNING: Var mycket försiktig när du använder alternativet Ljutförstärkning. Det här alternativet är avsett för användare med hörselnedsättning och kan orsaka hörselskador för personer som inte har några befintliga problem.

Ljutförstärkning ökar LUCIA-telefonens ljudvolym i den inbyggda hörluren och i externa hörlurar (om de är anslutna till ljuduttaget).

Aktivera Ljutförstärkning: Håll in knappen Ljutförstärkning på telefonens högerkant under ett telefonsamtal om du vill aktivera Ljutförstärkning, så höjs ljudet. Förstärkningen förblir aktiv tills samtalet avslutas och stängs av automatiskt efter avslutat samtal. Ljutförstärkning kan även inaktiveras genom ett andra tryck på knappen Ljutförstärkning.

Kundsupport:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



RoHS



FCC ID: 2ARJFLUCIA1

IC: 24486-LUCIA1